


TRANSFÉRER LA CLIENTE DU LIT À LA CHAISE D'AISANCES AVEC LE LEVIER À STATION DEBOUT (2 intervenantes)

Équipement

Caractéristiques de la cliente : mise en charge partielle sur les jambes | tonus moins prononcé au niveau du tronc et des membres supérieurs.

Étape 1

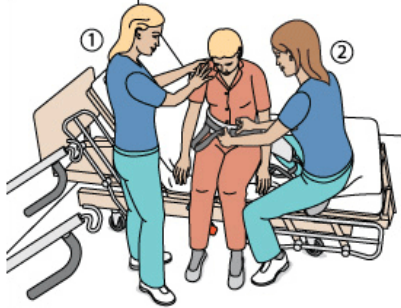


INTERVENANTE 1

- ♦ Stabiliser la cliente sur le bord du lit.

INTERVENANTE 2

- ♦ Installer la toile autour de la taille de la cliente (assise sur le bord du lit) le plus bas possible dans son dos, puis l'attacher.

Étape 2

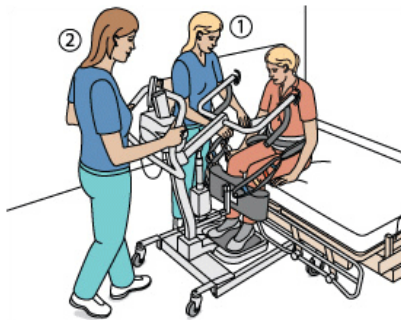

INTERVENANTE 2

- ♦ Approcher le levier de la cliente.


INTERVENANTE 1

- ♦ Accrocher les sangles de la toile sur le levier et lever la cliente légèrement.
- ♦ Maintenir la toile en place pendant la levée.

CLIENTE

- ♦ Déposer les pieds sur le repose-pied du levier.
- ♦ Tenir les poignées du levier et se pencher vers l'arrière.

Étape 3

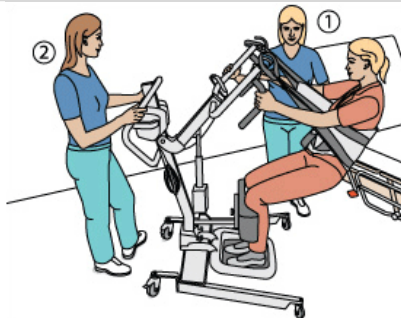

INTERVENANTE 2

- ♦ Ouvrir la base du levier et reculer.
- ♦ Appliquer un des freins au besoin et pivoter le levier en direction de la chaise d'aisances.


INTERVENANTE 1

- ♦ Sécuriser la cliente.

CLIENTE

- ♦ Garder la position.

Étape 4

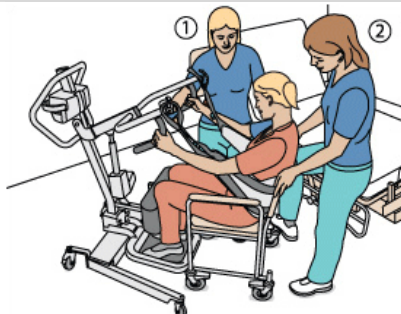

INTERVENANTE 2

- ♦ Avancer le levier vers la chaise jusqu'à ce que les fesses de la cliente touchent la chaise.
- ♦ S'installer derrière la chaise pour mieux l'immobiliser.

INTERVENANTE 1

- ♦ Descendre la cliente sur la chaise.
- ♦ Enlever les sangles de la toile des crochets du levier, puis enlever la toile.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.