


LEVER LA CLIENTE DU LIT AVEC UN VERTICALISATEUR NON MOTORISÉ

Équipement

Caractéristiques de la cliente : tonus du tronc et des membres supérieurs | capable de se lever, mais difficulté à faire quelques pas | bon maintien de l'équilibre debout.

Étape 1

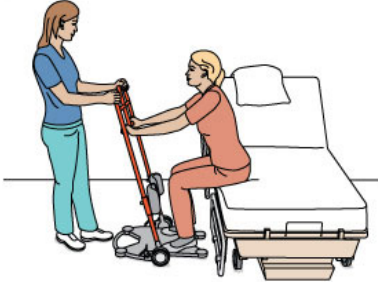

INTERVENANTE

- ♦ Approcher l'équipement de la cliente et lui donner les consignes d'utilisation.
- ♦ Appliquer les freins.

CLIENTE

- ♦ Placer les pieds sur la base, à l'endroit indiqué.
- ♦ Agripper la barre d'appui.

Étape 2



INTERVENANTE

- ♦ Stabiliser l'équipement en effectuant au besoin un léger transfert de poids ou contrepoids.

CLIENTE

- ♦ Tirer sur la barre d'appui pour se lever.

Étape 3



INTERVENANTE

- ♦ Enlever les freins du verticalisateur.
- ♦ Déplacer l'équipement pour se rendre à destination (toilette, fauteuil, chaise d'aisances ou autre).

CLIENTE

- ♦ Réajuster la prise sur la barre d'appui et maintenir son équilibre pendant le déplacement.

Étape 4



INTERVENANTE

- ♦ Positionner le verticalisateur face à la toilette (fauteuil, chaise d'aisances ou autre), puis appliquer les freins.
- ♦ Stabiliser l'équipement en effectuant au besoin un léger transfert de poids ou contrepoids.

CLIENTE

- ♦ Tenir la barre d'appui pour s'aider à s'asseoir.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.