


Toiles de lève-personne

Avant chaque utilisation,
inspecter la toile, les courroies et les attaches



**VÉRIFIER L'ÉTAT
DES COUTURES**

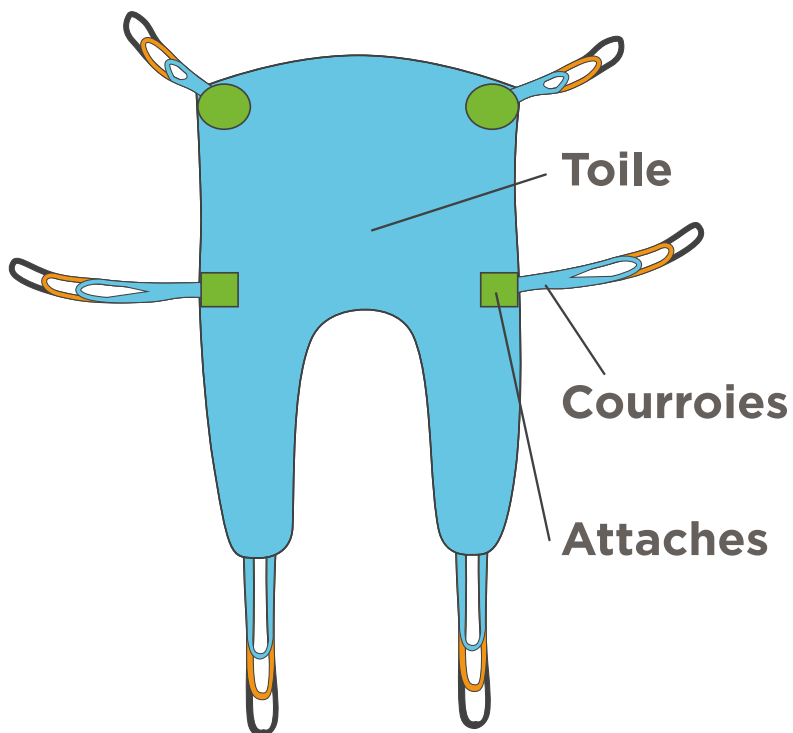

**VÉRIFIER
L'ABSENCE :**

- de déchirure
- d'usure excessive
- d'effilochage
- de rétrécissement
- de décoloration



**TOUCHER POUR
S'ASSURER DE
L'ABSENCE :**

- de changement
dans la texture
(ex. : rugosité,
rigidité)
- de zones fragiles



**NE PAS TIRER
sur les courroies
et les attaches**

Cesser l'utilisation de toute toile non conforme,
la retirer de la circulation et informer le supérieur.