


Un outil très pratique avec les tubes de glissement



Denis Tremblay
Hygiéniste du travail, CSSS Chicoutimi

INSTALLER UN TUBE DE GLISSEMENT SOUS LE PIQUÉ D'UN CLIENT QUI A DE LA DIFFICULTÉ À SE TOURNER, OU NE PEUT LE FAIRE, N'EST PAS SIMPLE. EN EFFET, POUR LA MISE EN PLACE, LE SOIGNANT DOIT PASSER LE BRAS SOUS LE CREUX DU DOS DU CLIENT, CE QUI LUI CAUSE DE L'INCONFORT.

Pour faciliter ce travail, nous avons développé une languette étroite qui permet de placer facilement la surface glissante sous le client. Les photos montrent les différentes étapes d'installation. ■

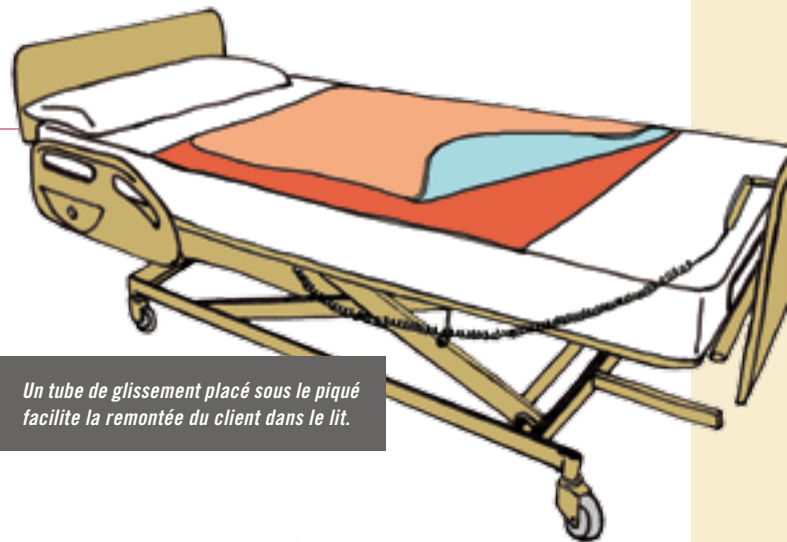

Un tube de glissement placé sous le piqué facilite la remontée du client dans le lit.

Languette en lexan : 71 cm x 4 cm
et 2 mm d'épaisseur (fabrication
maison ou Vitreterie nationale - 514
523-5440, 18 \$ env.).



2

ÉTAPE 1. Replier le tube de glissement en forme de triangle et déposer la languette près de la pointe.

ÉTAPE 2. Replier la pointe du triangle sur la languette.

ÉTAPE 3. Insérer le tout au niveau du creux lombaire du client, sous le piqué, et pousser jusque de l'autre côté du client.

ÉTAPE 4. Enlever la languette et étendre le tube des deux côtés du client, vers les épaules et les cuisses.



3



1



4